

Anleitung Atmos

Anleitung für das Absauggerät Atmos

Diese Anleitung ersetzt die persönliche Instruktion nicht.

Bitte lassen Sie sich das Gerät durch unsere Beraterinnen und Berater erklären.



- a) Bedienfeld
- b) Tragegriff
- c) Manometer
- d) Vakuumpumpe
- e) Anschluss für Steckernetzteil
- f) Einpatienten-Sekretbehälterdeckel
- g) Einpatienten-Sekretbehälter




Vor dem Absaugen:

Bei Inbetriebnahme müssen folgende Schritte gemacht werden:

- Bei kalten Temperaturen das Gerät zwingend sechs Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Dieser Schritt ist besonders wichtig bei Erstinbetriebnahme.
- Sekretbehälter abschrauben und mit Wasser reinigen.

Absaugschlauch oben in die Öffnung einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest sitzt.

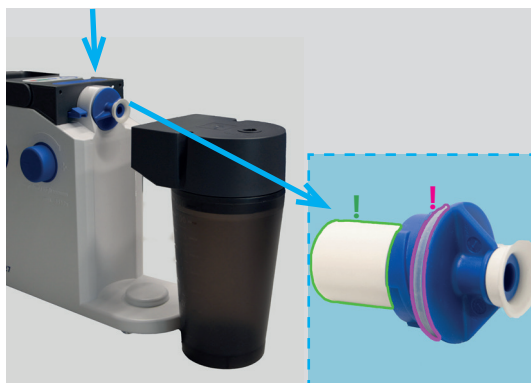

Auf den blauen Knopf oben auf dem Gerät drücken und den Wasserbehälter vom Gehäuse entfernen. Den Bakterienfilter anbringen und/oder kontrollieren.

Wichtig: Der weiße Filter darf hinten nicht berührt werden und muss trocken bleiben (grün markiert). Auch der Gummiring (pink markiert) darf nicht entfernt werden.



Das Gerät einschalten. Der Einschaltknopf befindet sich oben auf dem Gerät.

Intervallbetrieb: Beachten Sie, dass das Gerät nie länger als 30 Minuten im Einsatz steht, damit es nicht überhitzt. Danach soll das Gerät für mindestens 30 Minuten ausgeschaltet sein. Das gewährleistet eine ausreichende Abkühlung und eine optimale Erhaltung des Akkus.



Auf der Seite des Geräts ist der Drehkopf zu finden. Damit wird der Sog dosiert und reguliert. Der Sog wird verstärkt, wenn der Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird.

**Nach dem Absaugen:**

Absaugschlauch und Sekretbehälter entfernen. Dazu auf den blauen Knopf oben auf dem Gerät drücken und den Wasserbehälter vom Gehäuse entfernen. Den Schlauch mit Wasser ausspülen und den Behälter reinigen, damit alles für die nächste Absaugung bereit ist.

Nach jedem Gebrauch

Absaugschlauch und Saugschlauch mit Wasser durchspülen.

Täglich

Sekretbehälter leeren und mit Wasser und Spülmittel reinigen (ist spülmaschinenfest oder kann auch ausgekocht werden).

Monatlich

Absaugschlauch und Saugschlauch und Filterkartusche wechseln.

**Akkupflege und Kontrolle:**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, muss der Akku vollständig laden. Der Akku muss zudem vollständig geladen sein, bevor das Gerät bei Nichtbenutzung gelagert wird und auch, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, muss das Gerät alle drei Monate vollständig geladen werden. Vermeiden Sie häufiges Kurzladen.

Akkukapazität:

- Zwei grüne LEDs: >60%
- Eine grüne LED: 20-60%
- Eine rote LED: <20%

Anzeige während des Ladens:

Beim Laden leuchten beide grüne LEDs. Während des Ladens ist absaugen mit voller Saugleistung möglich.

Angaben zur Akkuladung:

- 50% geladen dauert drei Stunden
- Ladung dauert maximal 12 Stunden
- Akku hält mindestens 60 Minuten

Mai 2025

LUNGE ZÜRICH

The Circle 62, 8058 Zürich-Flughafen
T 044 268 20 00, F 044 268 20 20, beratung@lunge-zuerich.ch
www.lunge-zuerich.ch, Spendenkonto: CH62 0900 0000 8000 1535 7