


CPAP-Gerät

Anschluss Sauerstoff an ResMed CPAP-Gerät

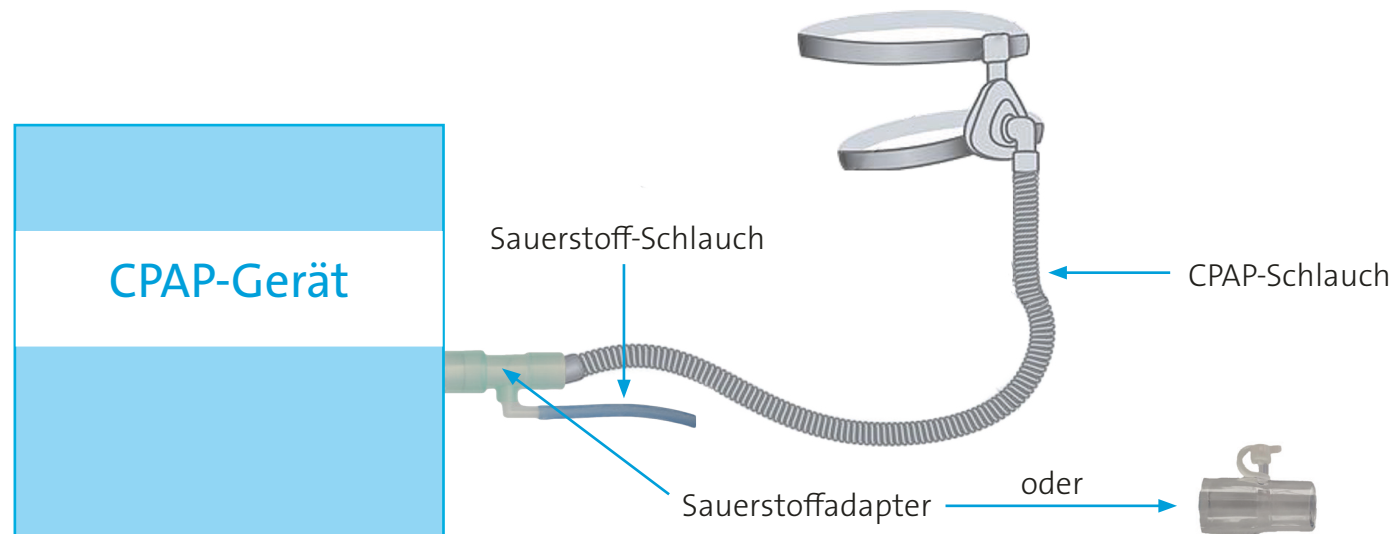

Wichtige Zusatzinformationen:

- Bei der Verwendung von Sauerstoff muss das CPAP-Gerät eingeschaltet werden, bevor die Sauerstoffzufuhr geöffnet wird. Die Sauerstoffzufuhr muss geschlossen werden, bevor das Gerät wieder ausgeschaltet wird. Dadurch wird verhindert, dass sich Sauerstoff im Gerät ansammelt.
- Zusätzlicher Sauerstoff Maximaler Flow: 4 l/min
- **Wird in der Nacht die CPAP-Therapie mit Sauerstoff benutzt, darf der Sauerstoff nicht befeuchtet werden.** Dies, da die Feuchtigkeit in das CPAP-Gerät und es Schäden davon trägt. Nutzen Sie bei trockenen Schleimhäuten anstelle der Sauerstoffbefeuchtung, den Befeuchter zum CPAP-Gerät.